

시니허그

S E N I H U G

사용설명서

SH-GV0105TB



목차

1 안전을 위한 주의 사항 안내

- 경고
- 주의

2 제품 안내

- 구성품
- 각 부분 명칭
- LED 색상별 표시

3 설치 및 사용 안내

- 제품 설치 및 전원 연결
- 기기 연결
- 기능별 사용

4 문제 해결

- 고장 진단
- 문제 해결

5 제품 정보

- 제품 사양

1

안전을 위한 주의 사항 안내

사용자의 예상치 못한 위험이나 손해를 막기 위한 안내입니다.



경고

지키지 않을 경우 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



젖은 손으로 전원 어댑터를 만지지 마세요.
감전 되거나 제품이 손상될 수 있습니다.



제품 및 부속품을 파손하거나 개조하지 마세요.
감전 되거나 화재가 발생할 수 있습니다.



제품 내부로 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 전원 어댑터를 분리한 후 제품을 사용하지 마세요.



주의

지키지 않을 경우 제품이 손상되거나 경미한 상해가 발생 할 수 있습니다.



제품 위에 무거운 물건을 적재하거나 강한 충격을 주지 마세요.
제품이 손상 될 수 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 어댑터를 분리하세요.

제품에서 이상한 소리나 냄새, 연기가 날 경우
즉시 어댑터를 분리하세요.

2

제품 안내


구성품 및 명칭



수면 케어 기기 (커버 내장형)



충전기 어댑터

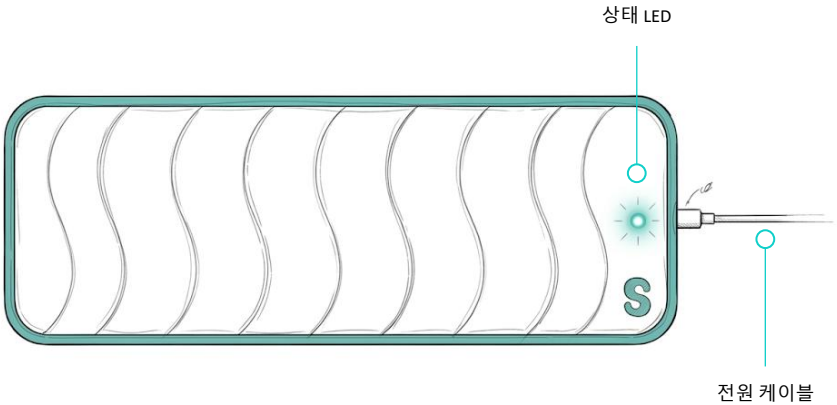

LED 색상별 표시



전원 연결



장치 사용



와이파이 연결 중



장치 이상



장치 미사용



서버 접속 중




공기 주입 중


3 설치 및 사용 안내

제품 설치 및 전원 연결


침대 프레임과 매트리스 사이에 제품을 설치합니다.

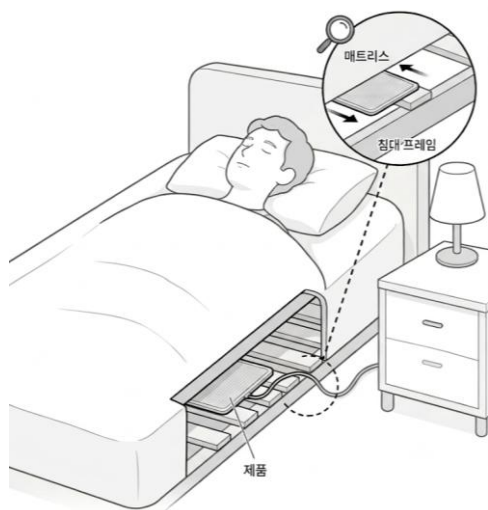

전원 어댑터를 콘센트에 연결합니다.

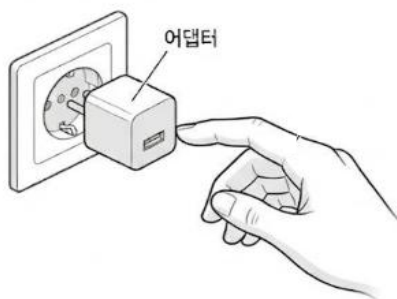



전원 케이블을 어댑터에 연결합니다.

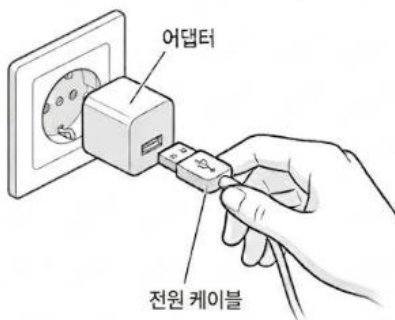



기기 연결

Wi-Fi 연결



오른쪽 상단의 더보기 메뉴를 누른 다음 항목 중 “Wi-Fi” 항목을 선택합니다.

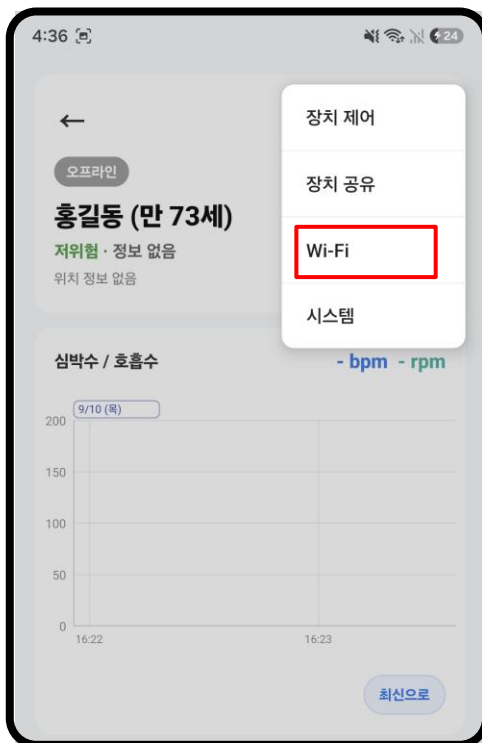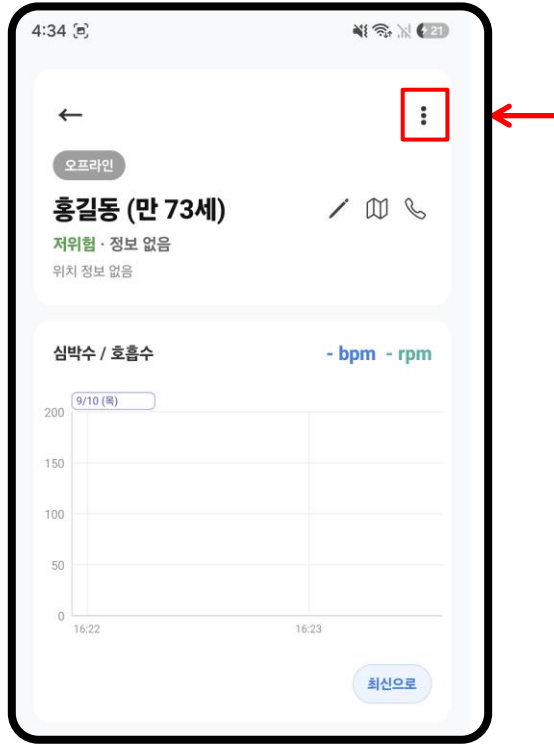


Wi-Fi 네트워크 연결을 누른 후 장치 스캔을 시작합니다.

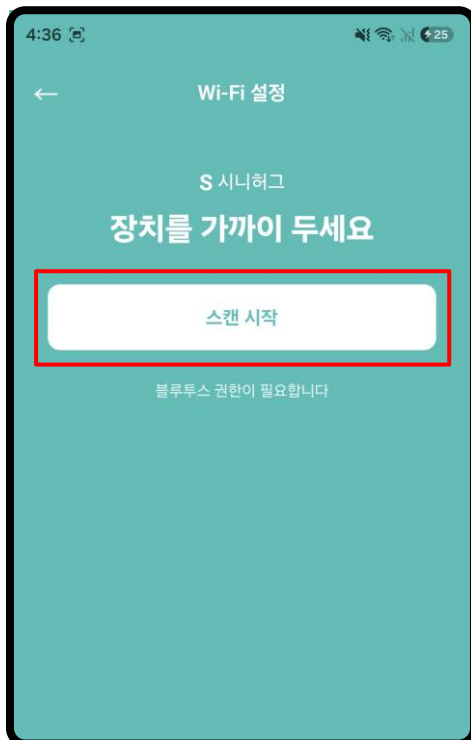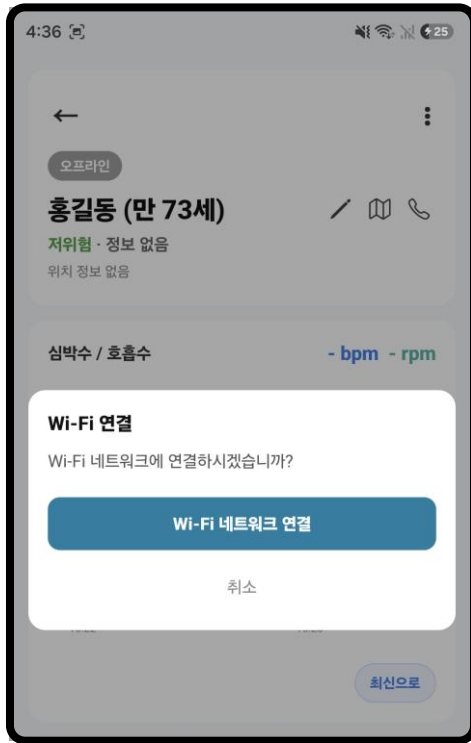


스캔이 시작되고 완료되면 **Wi-Fi 네트워크 선택** 목록이 나옵니다.
※스마트폰과 동일한 Wi-Fi로 잡아야 하며, 2.4GHz만 지원합니다.

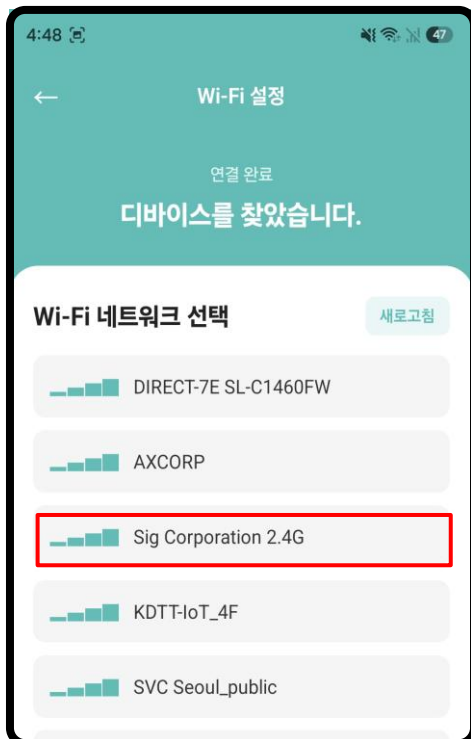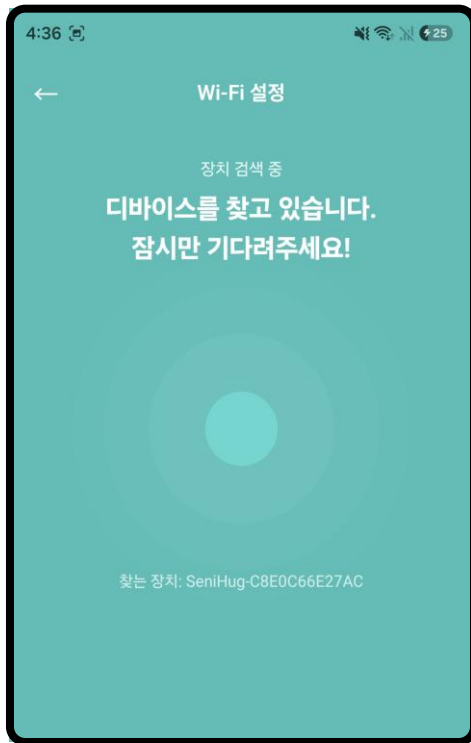

표시된 부분과 같이 “온라인 · 비어있음” 으로 표시되면 사용하실 수 있습니다.

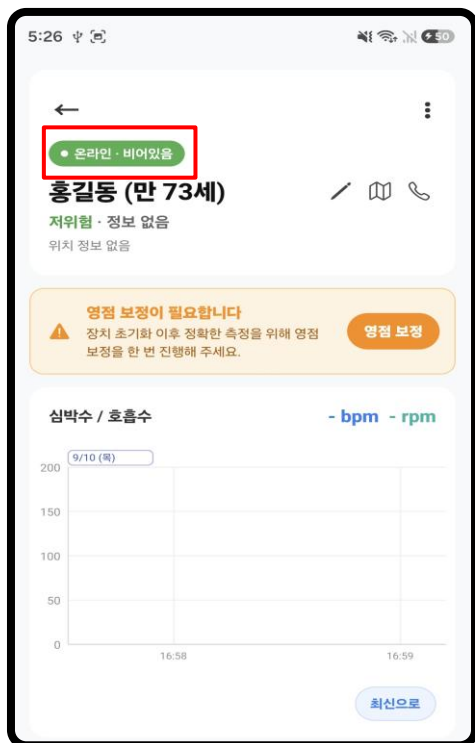

Wi-Fi 네트워크 연결을 완료한 후에 다시 Wi-Fi 연결을 선택하면 현재 설정된 Wi-Fi를 다른 네트워크로 변경할 수 있습니다.


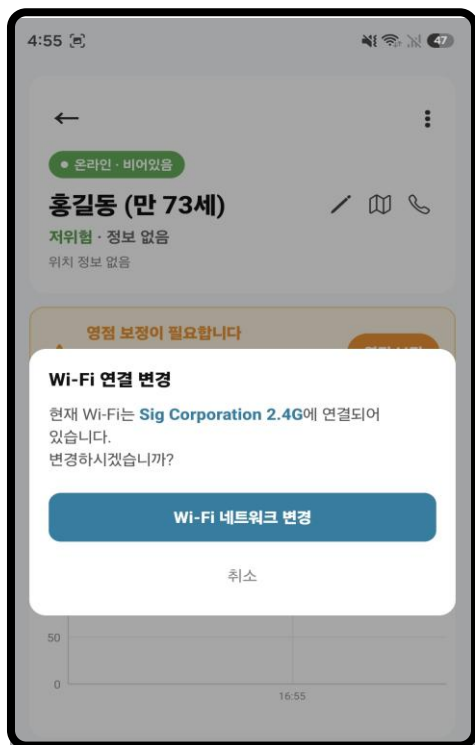


기능별 사용



영점 보정

영점보정은 제품이 지금 침대 상태를 기준으로 기억하는 과정입니다.

메인 화면에 나타나는 “영점 보정”을 누르거나 “장치 제어의 영점 보정”을 선택합니다. (처음 사용 또는 침대 환경이 변경될 경우 다시 한번 진행 해주세요.)

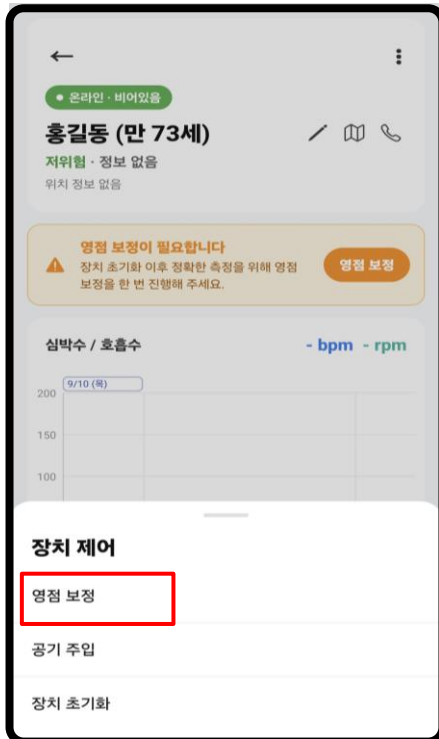
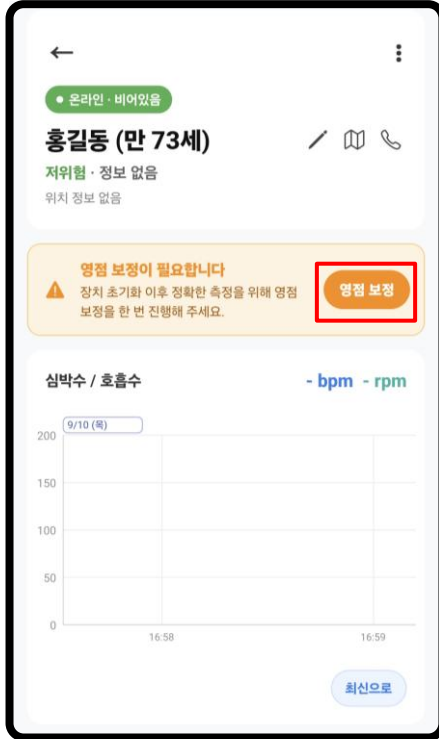


다음과 같이 안내창이 나오면 “확인”버튼을 눌러 영점 보정을 진행합니다.
보정을 수행될 동안 침대에서 내려와야 합니다.

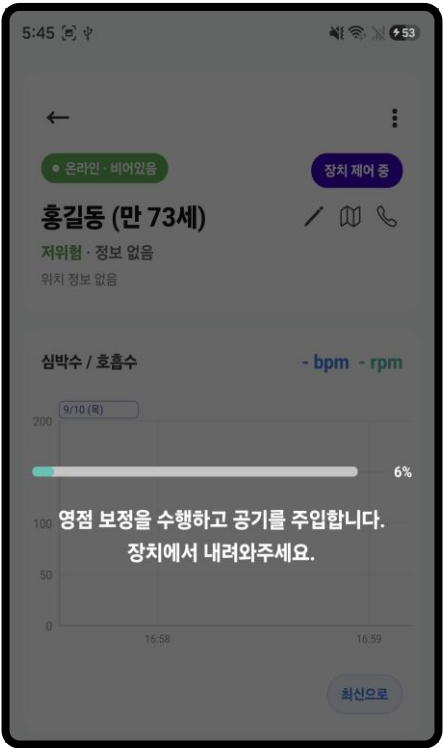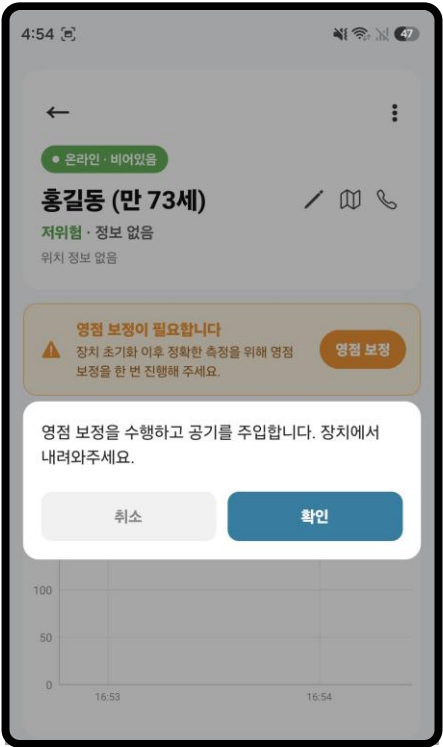



공기 주입

공기 주입은 영점 보정을 통해 맞춰진 값에 따라 공기를 주입하는 기능입니다.
“장치 제어의 공기 주입”을 선택하여 진행합니다.
주입이 수행될 동안 침대에서 내려와야 합니다.

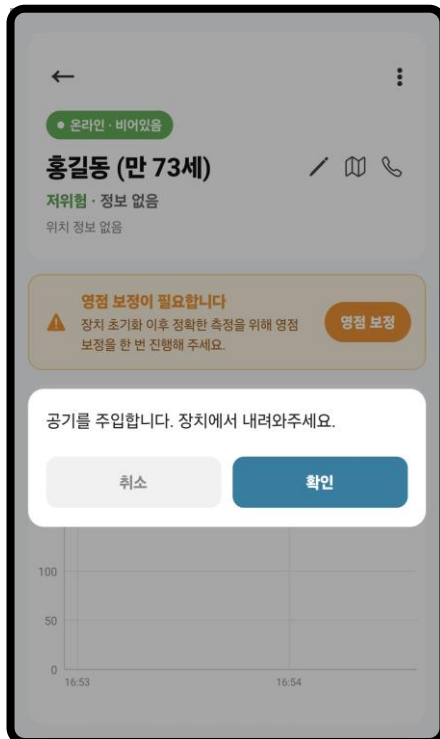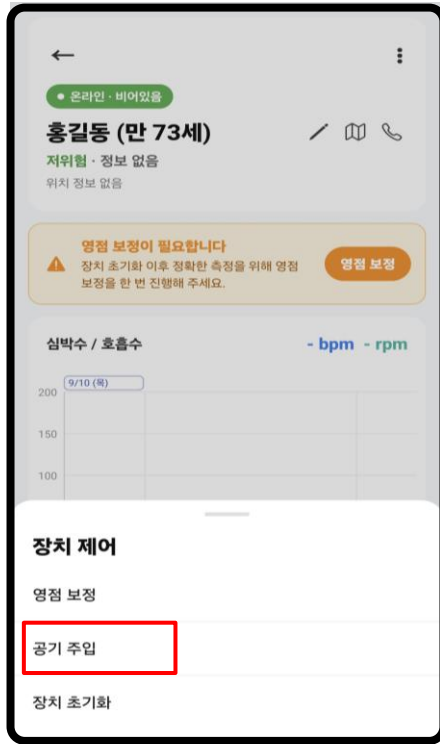

장치 초기화

장치 초기화는 장치에 연결된 와이파이를 재연결하기 위해 동작하는 기능입니다.

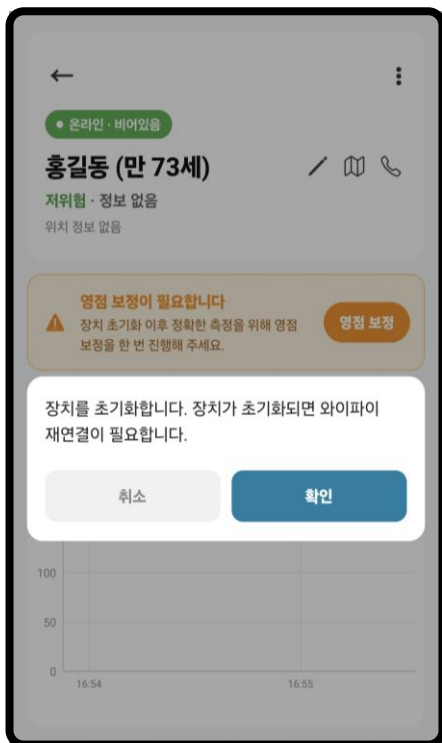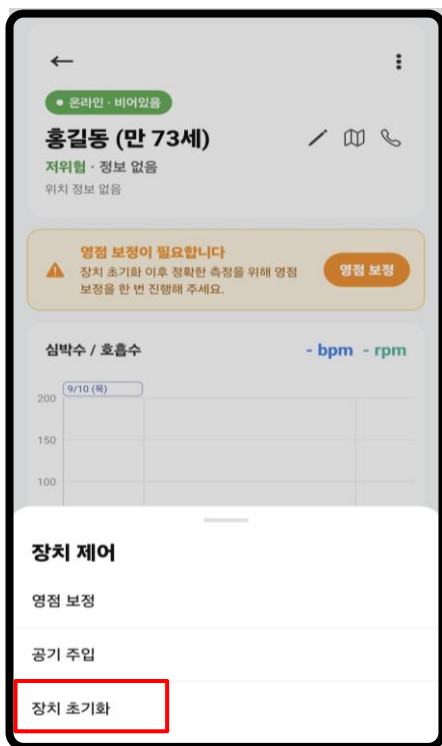

4

문제 해결

증상

제품과 스마트폰을 와이파이로 연결할 수 없어요.

제품이 켜지지 않아요.

원인 및 해결

무선 공유기의 주파수가 2.4 GHz 인가요?

- 제품을 와이파이로 연결할 때는 2.4 GHz 네트워크만 사용할 수 있습니다. 5 GHz 네트워크는 지원하지 않습니다.

제품과 무선 공유기가 멀리 떨어져 있나요?

- 제품과 무선 공유기의 거리가 먼 경우 무선 신호가 약해 접속이 원활하지 않을 수 있습니다. 무선 공유기를 제품 가까이로 옮기세요.

스마트폰에 연결된 와이파이와 다른 와이파이를 연결했나요?

- 스마트폰 설정의 네트워크 목록에서 사용 중인 와이파이와 제품과 연결할 때 선택하는 와이파이가 동일해야 합니다.

220V의 전압을 쓰고 있나요?

- 제품의 정격 전압은 220V 입니다. 콘센트에 표시된 전압을 확인하세요.

전기가 끊겼나요?

- 집 안에 있는 다른 제품의 전원을 확인하세요.

5

제품 정보



모델명

SH-GV0105TB

크기

190 x 637 x 5 (mm)

무게

350g

정격 입력

5V  1A

사용 환경 조건

45cm 이하의 스프링, 라텍스, 메모리 폼

제조사

(주) 시그코퍼레이션

제조국

한국

S 시니허그

수면을 감싸는 또 하나의 테어어

SLEEP CARE SOLUTION



시니허그



Website <http://www.senihug.com>



E-mail CEO@studiosig.com



Tel 010-7193-6414